

Mise en place de l'orthèse End-Osgood

**Matériel nécessaire :**

- 1 fer à repasser avec thermostat et vapeur / 1 chiffon en coton
- 1 orthèse END OSGOOD / 1 bande élastique de maintien Velcro

**Temps de mise en œuvre :**

15 min environ

**Précautions :**

L'orthèse est composée d'une matière thermoformable qui s'assouplit à 60°C. L'orthèse est recouverte de lycra, une chaleur trop excessive du fer à repasser peut brûler le Lycra et détériorer l'orthèse.

Veillez bien à régler le fer sur 60°C maximum

Il est conseillé de lire une première fois l'ensemble de la procédure de mise en place avant de commencer. A la suite du visionnage, vous pouvez décider de faire placer l'orthèse par votre médecin.

**Installation de l'enfant**

L'enfant doit être installé confortablement en position allongé ou semi-allongé.

Le genou sur lequel l'orthèse sera appliquée doit être plié.

**Mise en place :**

1. Faire chauffer le fer à thermostat 60°C (Vapeur activée)
2. Lorsque le fer est chaud, poser le chiffon en coton sur l'orthèse et repassez l'orthèse jusqu'à ce qu'elle devienne souple  
*Note : prenez garde à ne pas vous brûler lorsque vous manipulez l'orthèse*
3. Genou plié, repérez sur le genou de votre enfant la tubérosité tibiale, placez l'orthèse dessus et la centrer par rapport au genou  
*Note : assurez-vous que l'orthèse ne soit pas trop chaude et ne brûle votre enfant*
4. Moulez soigneusement l'orthèse et assurez-vous qu'elle épouse parfaitement la tubérosité tibiale ainsi que le relief du genou.
5. Laissez refroidir jusqu'à durcissement  
*Note : le genou de l'enfant doit rester plié jusqu'au durcissement total de l'orthèse*
6. Enlevez l'orthèse et mettre en place la bande élastique. Pour cela, passer une extrémité de la bande dans l'encoche (par l'intérieur de l'orthèse) et la fixer grâce au crochet Velcro
7. Positionner à nouveau l'orthèse sur le genou et passer l'autre extrémité de la bande élastique dans l'autre encoche et la fixer.
8. Ajuster le réglage de l'orthèse et vous assurant que la bande élastique n'est pas trop serrée.
9. Votre orthèse est maintenant en place.

Orthorepass décline toutes responsabilités concernant la procédure de mise en place de l'orthèse

Mise en place de l'orthèse End-Osgood

**Matériel nécessaire :**

- 1 fer à repasser avec thermostat et vapeur / 1 chiffon en coton
- 1 orthèse END OSGOOD / 1 bande élastique de maintien Velcro

**Temps de mise en œuvre :**

15 min environ

**Précautions :**

L'orthèse est composée d'une matière thermoformable qui s'assouplit à 60°C. L'orthèse est recouverte de lycra, une chaleur trop excessive du fer à repasser peut brûler le Lycra et détériorer l'orthèse.

Veillez bien à régler le fer sur 60°C maximum

Il est conseillé de lire une première fois l'ensemble de la procédure de mise en place avant de commencer. A la suite du visionnage, vous pouvez décider de faire placer l'orthèse par votre médecin.

**Installation de l'enfant**

L'enfant doit être installé confortablement en position allongé ou semi-allongé.

Le genou sur lequel l'orthèse sera appliquée doit être plié.

**Mise en place :**


1. Faire chauffer le fer à thermostat 60°C (Vapeur activée)
2. Lorsque le fer est chaud, poser le chiffon en coton sur l'orthèse et repassez l'orthèse jusqu'à ce qu'elle devienne souple  
*Note : prenez garde à ne pas vous brûler lorsque vous manipulez l'orthèse*
3. Genou plié, repérez sur le genou de votre enfant la tubérosité tibiale, placez l'orthèse dessus et la centrer par rapport au genou  
*Note : assurez-vous que l'orthèse ne soit pas trop chaude et ne brûle votre enfant*
4. Moulez soigneusement l'orthèse et assurez-vous qu'elle épouse parfaitement la tubérosité tibiale ainsi que le relief du genou.
5. Laissez refroidir jusqu'à durcissement  
*Note : le genou de l'enfant doit rester plié jusqu'au durcissement total de l'orthèse*
6. Enlevez l'orthèse et mettre en place la bande élastique. Pour cela, passer une extrémité de la bande dans l'encoche (par l'intérieur de l'orthèse) et la fixer grâce au crochet Velcro
7. Positionner à nouveau l'orthèse sur le genou et passer l'autre extrémité de la bande élastique dans l'autre encoche et la fixer.
8. Ajuster le réglage de l'orthèse et vous assurant que la bande élastique n'est pas trop serrée.
9. Votre orthèse est maintenant en place.

Orthorepass décline toutes responsabilités concernant la procédure de mise en place de l'orthèse

## Comment définir l'endroit où positionner l'orthèse ?

L'orthèse doit être centrée par rapport au genou.

La tubérosité doit se trouver environ à 2 cm du haut de l'orthèse

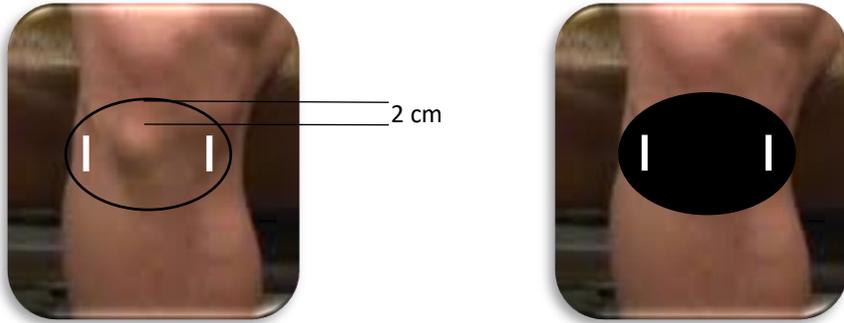

Vidéo :

<https://youtu.be/HjkN9F-qzi4>

(sur YouTube, rechercher ORTHOREPASS)

ORTHOREPASS

38 bis avenue Jean Jaurès

31170 Tournefeuille


[Support\\_client@orthorepass.com](mailto:Support_client@orthorepass.com)

Orthorepass décline toutes responsabilités concernant la procédure de mise en place de l'orthèse

## Comment définir l'endroit où positionner l'orthèse ?

L'orthèse doit être centrée par rapport au genou.

La tubérosité doit se trouver environ à 2 cm du haut de l'orthèse

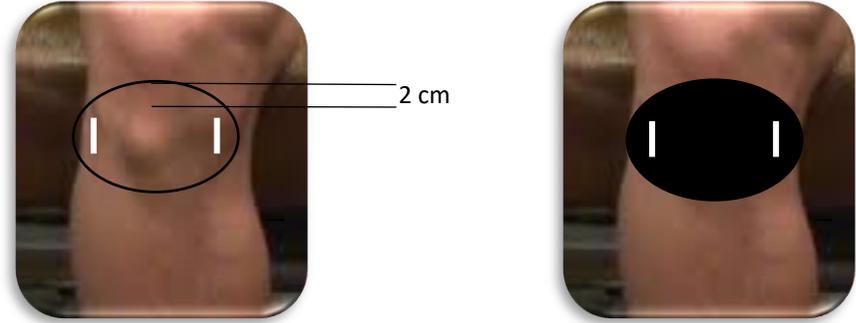

Vidéo :

<https://youtu.be/HjkN9F-qzi4>

(sur YouTube, rechercher ORTHOREPASS)

ORTHOREPASS

38 bis avenue Jean Jaurès

31170 Tournefeuille

[Support\\_client@orthorepass.com](mailto:Support_client@orthorepass.com)

Orthorepass décline toutes responsabilités concernant la procédure de mise en place de l'orthèse